

mediven[®] struva[®] 23

Meias anti-embolia com 23 mmHg de compressão no tornozelo.

Indicações

- Compressão no pós-operatório, de curto prazo, para promover o retorno venoso após intervenções cirúrgicas venosas (laqueações, escleroterapia, extracção da veia e terapia de trombólise)
- Para apoiar e complementar a mediven struva 35
- Terapia de compressão para evitar edemas e hematomas

Modo de acção

O gradiente de pressão estandardizado diminui continuamente do tornozelo em direcção à coxa. Estudos confirmam que o elevado grau de eficácia ao usar mediven struva acelera o refluxo venoso. Com 23 mmHg de compressão, a mediven struva é uma alternativa eficaz às ligaduras convencionais de compressão para as mesmas indicações.


Características

- Gradiente de compressão de definição precisa para um elevado grau de eficácia clínica
- Constrições dolorosas e edemas de janela são evitados com fiabilidade
- Segura, rápida e simples de usar
- Elevado nível de adesão devido ao conforto de utilização
- Altamente económica devido à sua utilização múltipla; simples de usar; as feridas são fáceis de inspeccionar e tratar
- Indicada para perímetros da coxa até 78 cm




Vantagens do produto

mediven struva 23 garante sempre as condições ideais de pressão: a compressão reduz-se continuamente de distal para proximal.

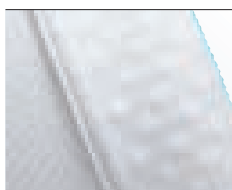

Banda de fixação inteligente

O banda de fixação em silicone, especialmente desenvolvido, evita o deslizamento informando de imediato sobre o ajuste correcto.

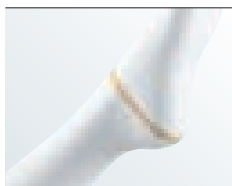

Região do calcanhar/peito do pé

O calcanhar em malha assegura a melhor redução possível da pressão e, juntamente com o código de cor no calcanhar/peito do pé, garante um posicionamento exacto no pé do paciente, permitindo reconhecer instantaneamente o tamanho indicado da meia anti-embolismo.



Biqueira aberta

A biqueira aberta é principalmente do interesse da segurança do paciente, visto que permite que a circulação seja monitorizada a qualquer altura e simplifica a higiene dos espaços interdigitais.

Acessórios

mediven struva fix é uma meia transparente, altamente elástica e com boa respiração usada no membro inferior como ligadura universal para inspecção, ao invés de ligaduras de gaze.



Joelho (AD)

Tamanho	Medidas do membro inferior (perímetro em cm)				Código de cor
	Tornozelo cB	Barriga da perna cC	Abaixo do joelho cD	Coxa cG	Calcanhar
I	17 – 19	30 – 35	28 – 34	–	rosa
II	19 – 21	31 – 37	29 – 36	–	azul
III	21 – 23	32 – 40	30 – 39	–	amarelo
IV	23 – 25	33 – 42	31 – 41	–	vermelho
V	25 – 27	34 – 44	32 – 43	–	cinzento
VI	27 – 29	35 – 46	33 – 45	–	verde
VII	29 – 31	36 – 48	34 – 47	–	castanho

Meia até à coxa (AG) também disponível com cinto

I	17 – 19	30 – 35	28 – 34	42 – 54	rosa
II	19 – 21	31 – 37	29 – 36	46 – 58	azul
III	21 – 23	32 – 40	30 – 39	50 – 62	amarelo
IV	23 – 25	33 – 42	31 – 41	54 – 66	vermelho
V	25 – 27	34 – 44	32 – 43	58 – 70	cinzento
VI	27 – 29	35 – 46	33 – 45	62 – 74	verde
VII	29 – 31	36 – 48	34 – 47	66 – 78	castanho