



Comfortable styles
Bliss

www.blisstextilemedicos.pt

SOUTIENS


CARACTERÍSTICAS GERAIS

Malha compressiva, com boa elasticidade adaptando-se ao corpo de forma confortável.


Tamanhos: 28-44 copa A/B/C

Cores:

- 1ª fase - Preto / pele ;
- 2ª fase - preto / pele / branco;
- 3ª fase - preto / Champanhe;
- 1ª fase – mobilidade reduzida/ IPO – pele.

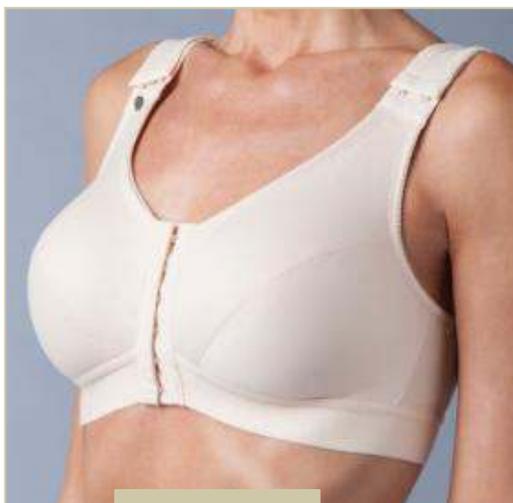


1ª Fase

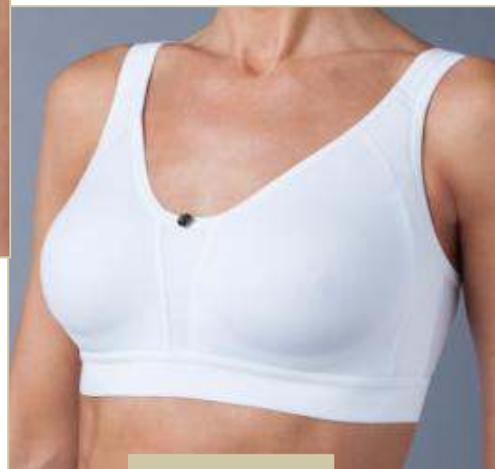

2ª Fase




3ª Fase

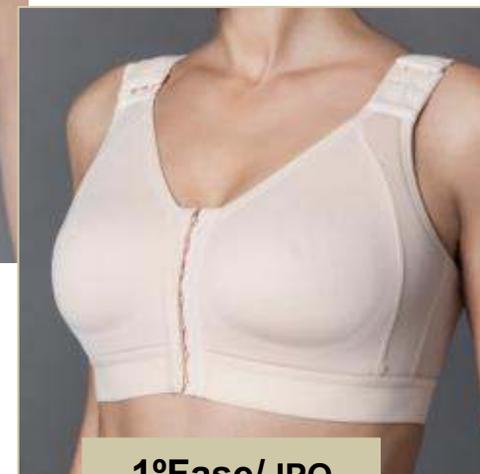

1ª Fase/ IPO
MOBILIDADE
CONDICIONADA

SOUTIEN ABERTO NA FRENTE

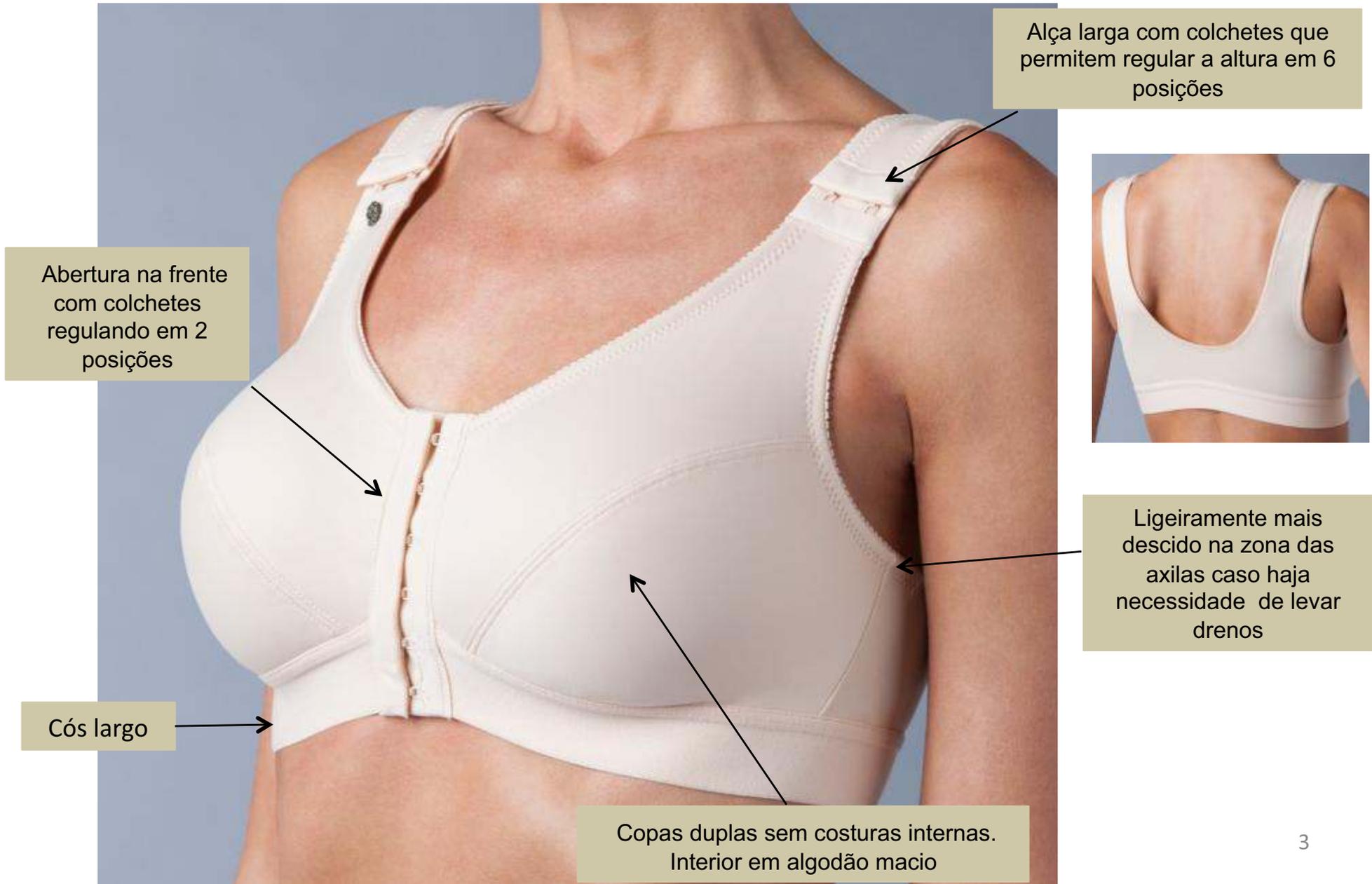

O Reforço interno do soutiens

- Funciona como um guia da mama.
- Faz uma ligeira compressão na cicatriz.
- Suporte do peso da mama aliviando a pressão na cicatriz inframamária.

1ª Fase / Mobilidade Reduzida/IPO



2ª Fase



3ª Fase



REDUÇÃO MAMÁRIA



Apoio na cicatriz lateral




Apoio na cicatriz inframamária

SOUTIEN C/ REFORÇO

Soutiens de 2º fase

Devido as suas características técnicas pode ser aplicado em diversas situações :

- Pós-cirúrgico.
- Mamas grandes e pesadas.
- Mamas fibrocísticas.
- Durante a gravidez.
- Adolescência
- Desporto

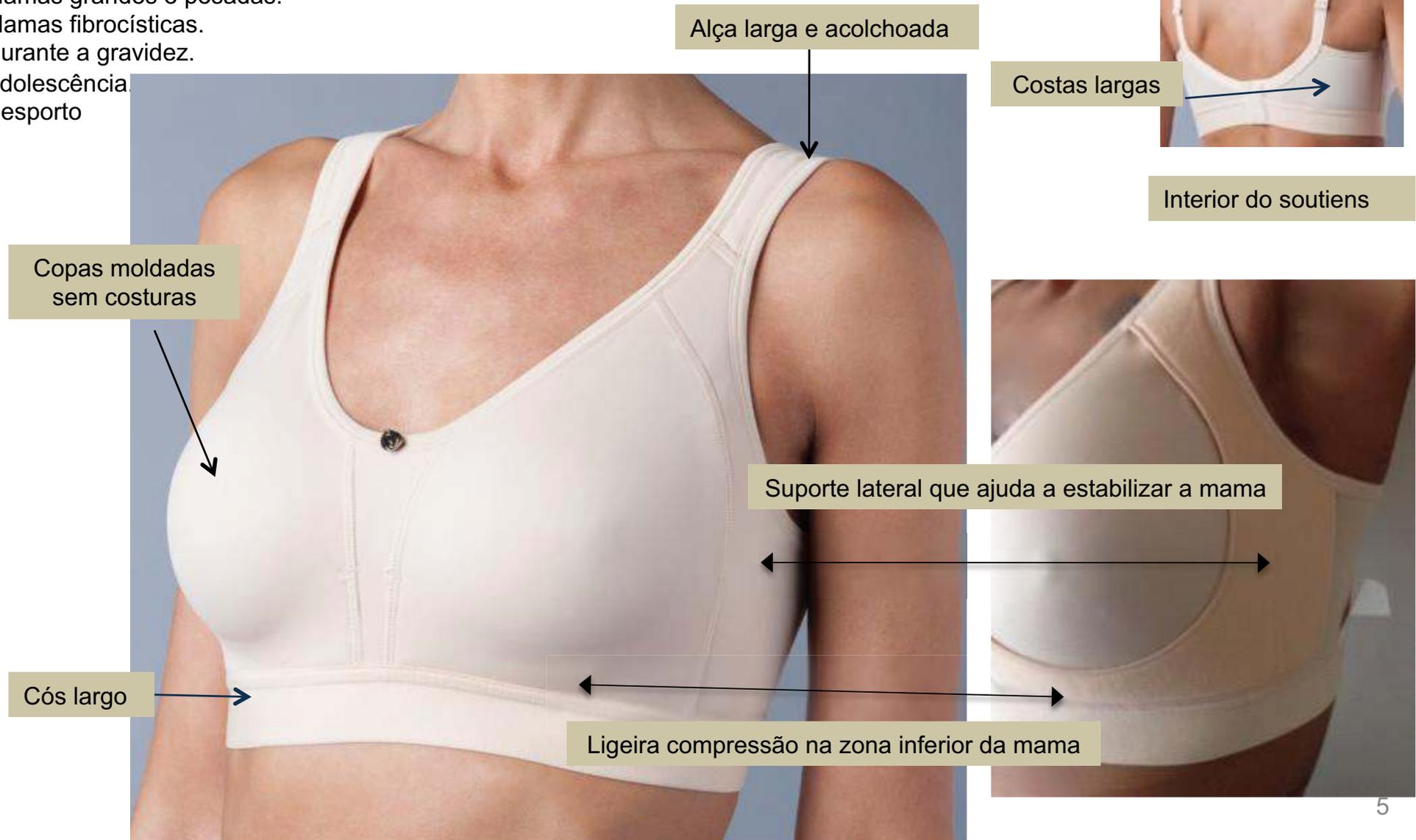

O Reforço interno do soutiens

- Funciona como um guia da mama.
- Proteção lateral que ajuda a estabilizar a prótese.
- Apoio inframamário que ajuda a suportar o peso da prótese, aliviando a pressão na cicatriz inframamária.

COLOCAÇÃO DE PROTESES AUMENTO MAMÁRIO

Bliss Comfortable styles


1ª Fase / Mobilidade Reduzida/IPO



2ª Fase



3ª Fase

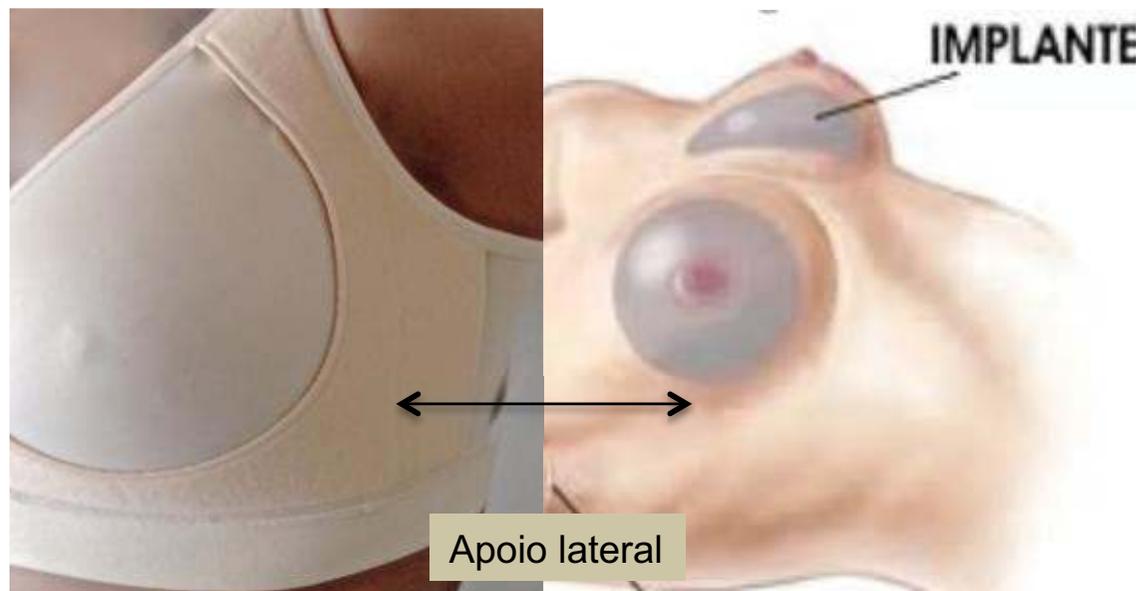

SOUTIEN C/ REFORÇO INTERNO

Alça larga com 2 posições




Costas largas



Interior do soutiens

Suporte lateral interno que ajuda a estabilizar a mama

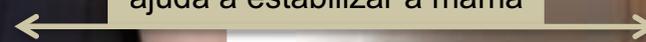

Ligeira compressão na zona inferior da mama



Copas moldadas sem costuras



Cós largo



SOUTIEN MOBILIDADE CONDICIONADA

Alça larga com colchetes que permitem regular a altura em 3 posições
Espuma na zona do ombro para maior conforto

Costas largas Abertura nas costas com colchetes que permitem regular em 3 posições



Abertura na frente com colchetes para facilitar colocação

Interior do soutiens



Suporte lateral em espuma que ajuda a estabilizar a mama

Contorno em espuma zona inferior da mama

Cós largo com elástico muito suave

O Reforço interno do soutiens

- Funciona como um guia da mama ajudando a desenvolver-se naturalmente.
- Proteção lateral que estabiliza a mama.
- Apoio inframamário que suporta o peso da mama, aliviando a pressão na cicatriz.

1ª Fase /Mobilidade reduzida IPO





2ª Fase



3ª Fase



RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA

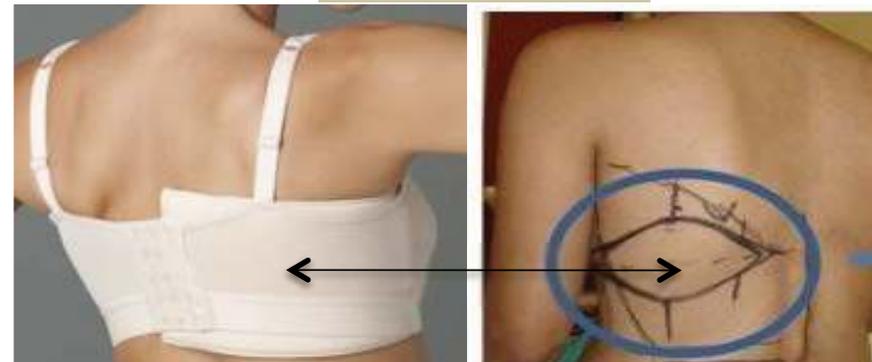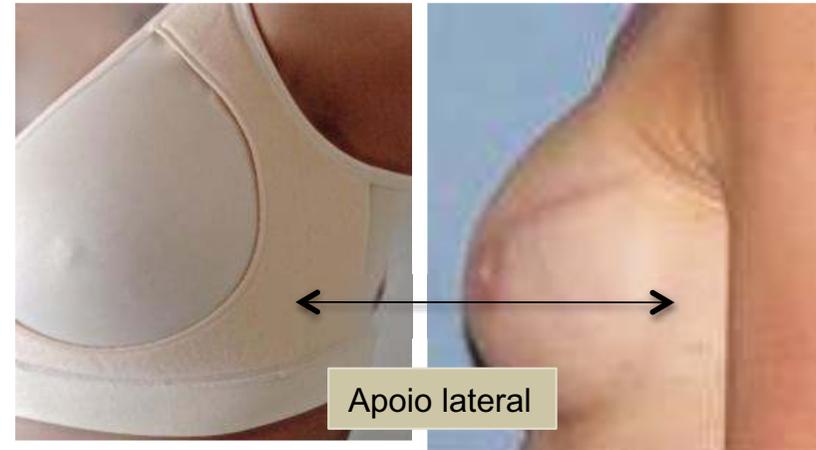

Apoio dorsal - aplicação de placa de espuma colocada nas costas dentro do soutiens



1. medir imediatamente abaixo do peito, c/ fita métrica bem apertada.




2. medir á volta do peito, c/ fita métrica solta.

TABELA DE MEDIDAS SOUTIEN							
MEDIDA 1 imediatamen te abaixo do peito	EUROPA	PORTUGAL	FRANÇA ESPANHA	MEDIDA 2 á volta do peito			
				COPA B	COPA C	COPA D	COPA E
63-67	65	30	80	79-81	81-83	83-85	85-87
68-72	70	32	85	84-86	86-88	88-90	90-92
73-77	75	34	90	89-91	91-93	93-95	95-97
78-82	80	36	95	94-96	96-98	98-100	100-102
83-87	85	38	100	99-101	101-103	103-105	105-107
88-92	90	40	105	104-106	106-108	108-110	110-112
93-97	95	42	110	109-111	111-113	113-115	115-117
98-102	100	44	115	114-116	116-118	118-120	120-122
103-107	105	46	120	119-121	121-123	123-125	125-127

CINTAS COMPRESSIVAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Malha compressiva, com boa elasticidade adaptando-se ao corpo de forma confortável;
- Cintas de compressão adequada e constante, extremamente confortáveis que modelam o corpo e auxiliam a na recuperação;
- Costuras planas.
- Tamanhos senhora: 28-46 ; Tamanhos homem: 28-46
- Cores: preto / pele

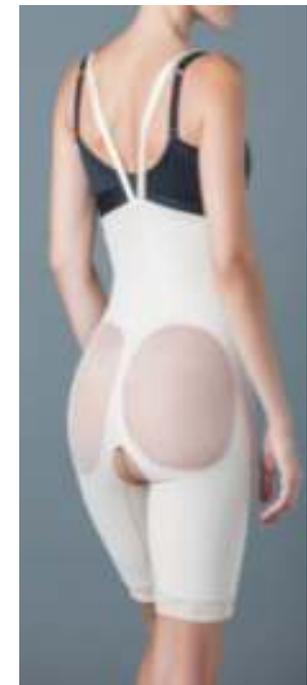

CINTA S/ PERNA



Alças amovíveis lateralmente e reguláveis aplicadas pelo exterior da cinta

Abertura lateral com colchetes ajustáveis em 3 níveis

Reforço nas zonas da cintura e dorsal

Fundo fechado com colchetes



CINTA C/ PERNA



CINTA MACACÃO

Alças reguláveis c /vários níveis




Reforço nas zonas dorsal, cintura, nádegas, ancas e coxas



Elástico removível para estabilizar as alças

Abertura frontal com colchetes ajustáveis em 3 níveis

Fundo fechado com colchete para manter cinta estável s/ pressão nas virilhas

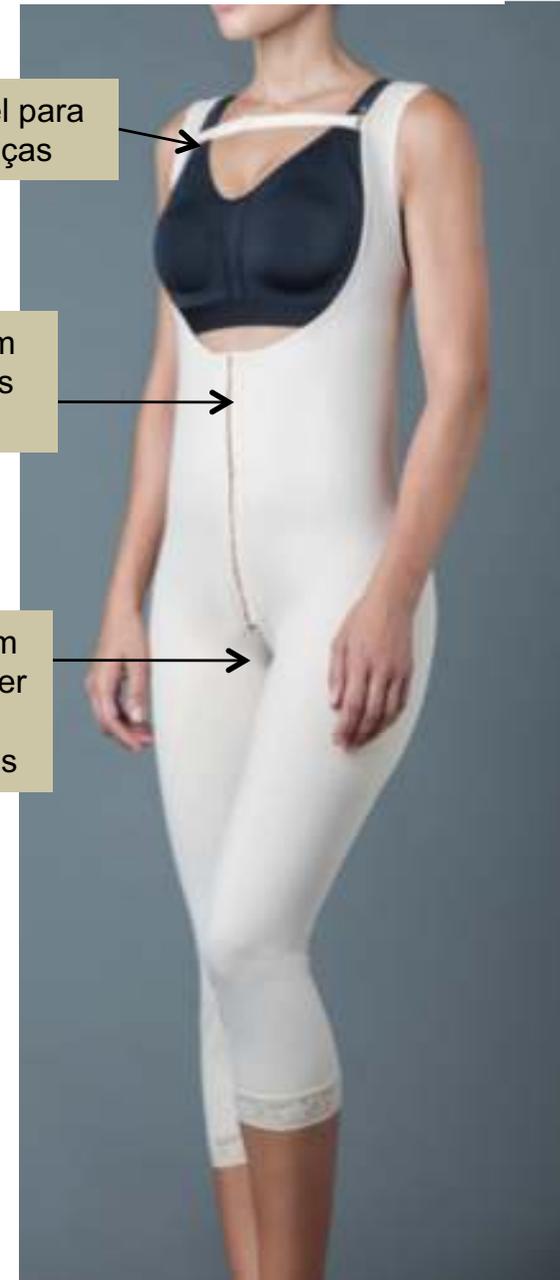

CINTA CALÇÃO



Alças amovíveis lateralmente e reguláveis

Abertura frontal com colchetes ajustáveis em 3 níveis

Fundo fechado com colchete para manter cinta estável s/ pressão nas virilhas

Reforço nas zonas da cintura e dorsal, nádegas, ancas e coxas



CINTA GLUTEOS

Cinta para implantes de próteses de glúteos com encaixe adequado, para proporcionar a segurança e a mobilidade do dia a dia do pós cirúrgico



Reforço nas zonas dorsal

Encaixe adequado, para proporcionar a segurança e mobilidade

Alças amovíveis lateralmente e reguláveis aplicadas pelo exterior da cinta



Abertura frontal com colchetes ajustáveis em 3 níveis

PERNITOS


Fundo fechado com colchete, para manter cinta estável s/ pressão nas virilhas



Costuras planas colocadas de maneira a não colidir com costuras do lifting das coxas



Elástico largo e ajustável com velcro para não vincar na cintura

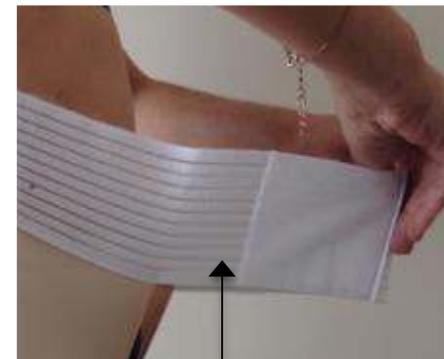

PERNITOS

MEDIDAS – PERNITOS C/ REFORÇO (REF. 2516582)										
Medidas	XXXXS 28	XXXS 30	XXS 32	XS 34	S 36	M 38	L 40	XL 42	XXL 44	XXXL 46
COXA (cm)	43-52	52-55	55-58	58-61	61-64	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79

Nota: medida da coxa é tirada aproximadamente a meio da perna (entre virilha e joelho).



Vestir a cinta, colocar as alças segurar com a mão esquerda e controlar com a mão direita se a costura está na linha da coluna



Apertar sempre no 1º colchete para ter possibilidade de ajustar à medida que for desinchando.

A cinta BLISS veste 1 a 2 tamanhos abaixo, em relação ao tamanho de calça que a paciente usa. Ex: se usar 40 de calça experimentar cinta 38 ou 36



Certo

A cinta tem que estar apertada no 1º colchete e tem que estar a direito na perna



Errado



Apertar no 1º colchete para poder ajustar à medida que a paciente for desinchando



As cintas BLISS podem vestir 1 a 2 tamanho abaixo da medida de calças da paciente

1º passo vestir as perna com as costuras para traz



Puxar as 2 pernas da cinta até aos joelhos



Deixar a renda abaixo do joelho e puxar as 2 pernas até baixo



O próprio tecido faz de alavanca escorregando por cima do mesmo, puxando o tecido da perna lentamente até a virilha.



Verificar com a mão se a costura das costas está na linha da coluna.



Puxar as pernas até onde conseguir para ficar mais confortável



Depois de colocada apertar os colchetes fazendo força, começar de baixo para cima, do nível mais largo para depois ir ajustando



A cinta tem que estar 2 a 3 dedos abaixo do peito



Apertar o colchete no meio das pernas por cima das cuecas



2. medir á volta da anca (zona mais larga das nádegas)


CINTAS COMPRESSIVAS

Medidas	XXXX S 28	XXXS 30	XXS 32	XS 34	S 36	M 38	L 40	XL 42	XXL 44	XXXL 46
2. Anca (cm)	80-85	85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120	120-125	125-130

Nota: outra forma de medir é dar a experimentar uma cinta 2 tam. abaixo da medida de calça.

MANGAS

Molas que apertam na alça do soutiens para ajudar a manter as mangas na posição correta, sem prender os movimentos da paciente.

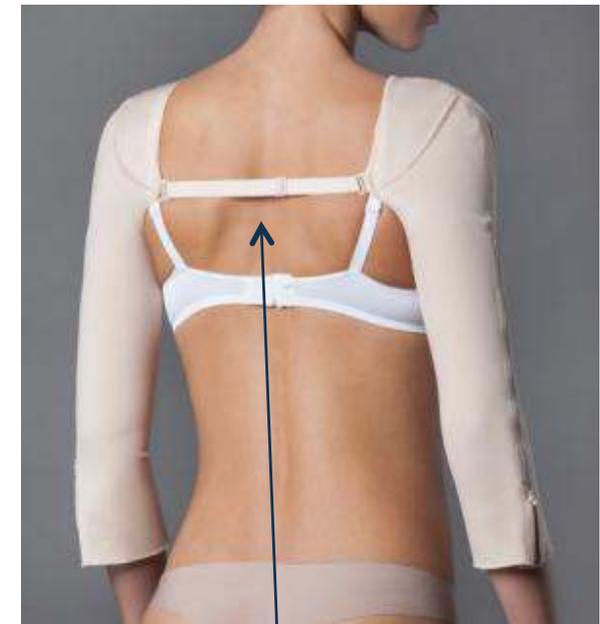

Elástico nas costas ajustável, para manter as mangas na posição correcta



Costuras planas colocadas de maneira a não colidir com costuras do lifting do braço

Fundo das mangas evasé (mais largas)

Abertura de fecho para facilitar colocação

MANGAS

MEDIDAS - MANGAS		
Tamanhos	Contorno Submamário (cm)	Contorno braço (cm)
S	70-77	24-27
M	77-84	27-30
L	84-91	30-33

Nota: medida do contorno do braço é tirada aproximadamente a meio do braço (entre axila e cotovelo).

FAIXA LIFTING

Elástico ajustável
com velcro



Velcro na nuca para ajustar a
medida do pescoço

Costura "solta" para
não exercer pressão
na bochecha

Costura para o exterior
a demarcar o queixo

MALHAS COMPRESSIVAS HOMEM

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Malha compressiva, com boa elasticidade adaptando-se ao corpo de forma confortável;
- Cintas de compressão adequada e constante, extremamente confortáveis que modelam o corpo e auxiliam a na recuperação;
- Abertura frontal com Colchetes ajustáveis em 3 níveis.
- Costuras planas.
- Tamanhos cintas: 28-46
- Tamanhos Coletes : 3XS – XL
- Cores: pele



COLETE HOMEM



Abertura na frente com
colchetes regulando em 3
posições

Alça larga com colchetes que
permitem regular a altura em
várias posições



CINTA HOMEM



Abertura frontal com colchetes ajustáveis em 3 níveis

Alças amovíveis lateralmente e reguláveis
Aplicadas pelo exterior da cinta

Reforço nas zonas da cintura e dorsal, nádegas, ancas e coxas



MEDIDAS COLETE HOMEM

Tamanhos	Contorno máximo de peito (cm)
XXS	85- 90
XS	90- 95
S	95- 100
M	100- 105
L	105- 110
XL	110- 115
XXL	115- 120
XXXL	120- 125

MEDIDAS CINTA HOMEM

Tamanhos	Contorno cintura (cm)
30	85- 90
32	90- 95
34	95- 100
36	100- 105
38	105- 110
40	110- 115
42	115- 120
44	120- 125
46	125- 130

PLACAS COMPRESSIVAS


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- São placas que realizam compressão suave e contínua, favorecendo um alisamento da pele evitando dobras e auxiliando na redução de edemas, hematomas, fibroses...
- Indicadas no pós-cirúrgico de Lipoaspiração e abdominoplastia.

Modo de usar

São colocadas sobre a pele, por baixo da cinta compressiva.

Fabricadas em materiais antialérgicos e antibacterianos, macios, confortáveis e de fácil adaptação.

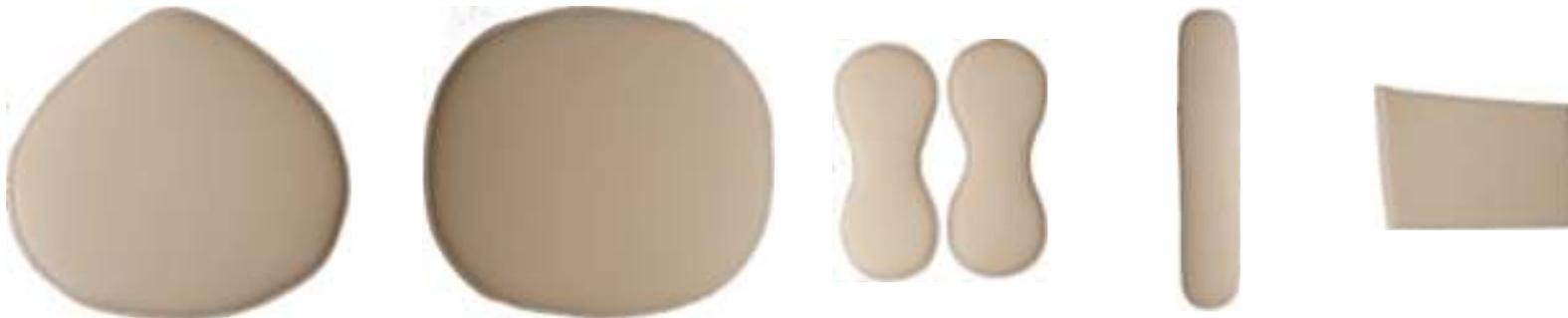

PLACAS COMPRESSIVAS

